



Garantieschein

Modell:.....

Seriennummer:

Kaufdatum:.....

Stempel der Verkaufsstelle
und leserliche Unterschrift des Verkäufers:.....

1. ANTAR SpJ., 03-068 Warszawa, ul.Zawisłańska 43, gewährt hiermit auf das Produkt eine 12monatige Garantie ab dem Tag der Übergabe des Produkts an den Käufer. Für Produkte, die von der polnischen staatlichen Krankenkasse NFZ erstattet werden, gilt eine verlängerte Garantiefrist, die der Hälfte der Nutzungsdauer entspricht, die in der Verordnung zu den garantierten Leistungen festgelegt ist, unter der Bedingung, dass die Nutzungsdauer in der Verordnung in Monaten bzw. in Jahren festgelegt wurde.
2. Während der Garantiefrist verpflichtet sich ANTAR, die notwendigen Reparaturen auszuführen, um das Produkt wieder funktionstüchtig zu machen, innerhalb von 14 Tagen ab Eingang des reklamierten Produkts.
3. ANTAR behält sich das Recht vor, das Produkt auszutauschen, falls angenommen werden muss, dass eine Reparatur unrentabel wäre.
4. Falls Sie feststellen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie es unverzüglich an die Adresse der Firma ANTAR (in Pkt. 1 angegeben) einsenden bzw. Ihre Verkaufsstelle kontaktieren.
5. Vor Ingebrauchnahme sollten Sie die Bedienungsanweisung lesen und sie genauestens einhalten. Zweckentfremdete Benutzung des Produkts hat den Verlust der Garantie zur Folge.
6. Der Garantie unterliegen keine Beschädigungen infolge von Durchbohren bzw. Durchschneiden mit einem scharfen Gegenstand, Beschädigung infolge mechanischer Kräfte von außen, infolge einer das in der Bedienungsanleitung angegebene maximale Körpergewicht des Benutzers überschreitenden Belastung, Kontakt mit fettigen bzw. öligen Substanzen, Benzin.
7. DIESES GARANTIEDOKUMENT IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT EINEM KAUFNACHWEIS (KASSENBon ODER RECHNUNG), BITTE FÜGEN SIE BEI REKLAMATION DEN KAUFNACHWEIS BEI. ZUR ANERKENNUNG DER VERLÄNGERTEN GARANTIEFRIST FÜR PRODUKTE, DEREN KAUF VON DER KRANKENKASSE NFZ ERSTATTET WURDE, IST ES NOTWENDIG, EINE KOPIE DES "AUFTRAGS FÜR DIE AUSSTATTUNG MIT MEDIZINPRODUKTEN, DIE ORTHOPÄDISCHE GEGENSTÄNDE UND HILFSMITTEL SIND", BEIZUFÜGEN."
8. Reklamationen ohne Kaufnachweis können nicht berücksichtigt werden.



Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.




Bedienungsanleitung ECON 220 Rollstuhl




1. Allgemeine Information

Der Rollstuhl ist für Personen bestimmt, die vorübergehend oder dauerhaft nicht in der Lage sind, sich selbstständig fortzubewegen. Der von Ihnen erworbene Rollstuhl kann von Personen mit einem Gewicht von bis zu 120 kg verwendet werden. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Rollstuhl verwenden. Dies ist wichtig für Ihre Sicherheit.


Anleitung zum Entfalten des Rollstuhls:

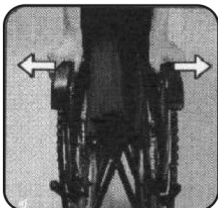

Ziehen Sie den Rollstuhl auseinander

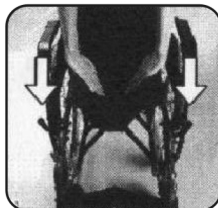

Drücken Sie den Sitz langsam, mit beiden Händen nach unten

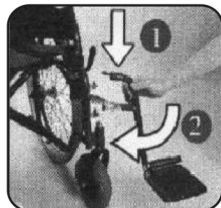

Befestigen Sie eine Fußstütze. Stellen Sie sicher, dass die Halterung gut in der Nut sitzt und die Fußstütze arretiert ist.




Klappen Sie die Fußstützen runter.


Anleitung zum Falten des Rollstuhls:



Klappen Sie die Fußstützen hoch.

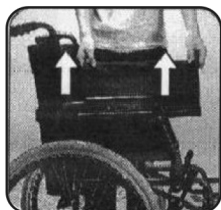

Ziehen Sie am Gurt des Sitzes mit beiden Händen um ihn zu falten.

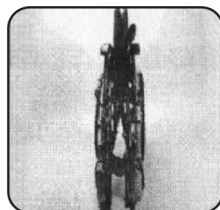

Falten beendet

Das Produkt wird mit einem Sechskantschlüssel geliefert - bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf, vorzugsweise in der Rückentasche.



Hochklappen der Armlehne – Ziehen Sie am Stift, um die Armlehne herunterzuklappen. Absenken der Armlehne - Bewegen Sie die Armlehne in die gewünschte Position. Stellen Sie sicher, dass der Stift richtig auf der Vorderseite des Ständers sitzt.



Entriegeln Sie die Verriegelung, um die Fußstütze zu lösen.

Das Produkt hat abnehmbare Hinterräder. Um sie zu lösen, drücken Sie den Knopf neben der Radbefestigung und ziehen Sie dann das Rad zu sich hin.

2. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN:

- 1) Beim Ein- und Aussteigen sollten die Bremsen eingestellt und angezogen sein;
- 2) Bremsen Sie nicht während der Fahrt, sondern nur beim Parken! Dies gilt nicht für die Handbremse des Schiebers (bei Modellen mit dieser Option).
- 3) Achten Sie beim Vorbeugen darauf, dass Ihr Körper nicht zu weit nach vorne rutscht. Um die Stabilität des Rollstuhls zu erhöhen, achten Sie darauf, dass die Vorderräder in Fahrtrichtung nach vorne zeigen, bevor Sie nach vorne kippen!
- 4) Lehnen Sie sich nicht übermäßig nach vorne und lehnen Sie sich nicht seitlich über die Kontur des Rollstuhls hinaus!

HINWEIS: ÜBERMÄSSIGES NEIGEN NACH VORNE ODER ZUR SEITENWAND KANN ZU UNFÄLLEN FÜHREN;

Stellen Sie sich beim Ein- und Aussteigen nicht auf die Fußstützen, da dies zum Umkippen des Wagens führen kann;

ACHTUNG: DURCH STEHEN AUF DEN FUSSSTÜTZEN KANN DER ROLLSTUHL UMKIPPEN UND VERLETZUNGEN VERURSACHEN

ACHTUNG: AUFPUMPEN MIT DEM KOMPRESSOR IST VERBOTEN!

ACHTUNG: UNBEDACHTES ODER UNVORSICHTIGES VERLAGERN DES KÖRPERS AUF DIE HINTERRÄDER KANN DAZU FÜHREN, DASS DER ROLLSTUHL RÜCKWÄRTS FÄLLT, WAS SEHR GEFÄHRLICH IST UND SCHWERE VERLETZUNGEN VERURSACHT! BEI ZWEIFELN EIN HINDERNIS ZU ÜBERWINDEN, BITTEN SIE BITTE EINE ANDERE PERSON UM HILFE!

3. Service und Wartung:

- Der Rollstuhl hat einen faltbaren Rahmen - er wird zusammengeklappt, indem der mittlere Teil des Sitzes nach oben gezogen wird (Sie müssen zuerst das mit Klettverschluss am Sitz befestigte Kissen lösen), und es entfalten, indem Sie die Seiten des Sitzes nach unten drücken. Achten Sie darauf, dass die Seiten des Sitzes vollständig in den Kunststoffrasten aufliegen. Ungenaueres Aufklappen des Sitzes kann dazu führen, dass die Rasten brechen und der Rollstuhl beschädigt wird.
- Regelmäßige Kontrollen des Zustands des Rollstuhls und der Wartung sollten durchgeführt werden von:
- Reifendruckkontrolle – der Druck sollte in beiden Rädern gleich sein und 3,8 bar nicht überschreiten.
- Überprüfen Sie den Zustand der Reifen - wenn sie einen starken Verschleiß aufweisen, sollten sie gleichzeitig ersetzt werden;
- Überprüfung der Festigkeit der Schrauben der Verbindungselemente;
- Reinigen der Schmutzbürste mit einem feuchten Tuch;
- Reinigung der Polsterung mit einem feuchten Tuch, eventuell unter Zusatz von Reinigungsmitteln;
- Desinfizieren der Rollstuhl-Polsterung mit zertifizierten Desinfektionsmitteln;

4. Hindernisse überwinden:

- Bei der Auswahl eines Rollstuhls raten wir Ihnen, um das beste Modell zu kaufen, eine ärztliche Meinung einzuholen.
- Wenn Sie aus irgendeinem Grund die Hindernisse beim Fahren auf dem Rollstuhl nicht überwinden können, bitten Sie um Hilfe. Versuche, das Hindernis aus eigener Kraft zu überwinden, können zum Kentern des Rollstuhls und zu Verletzungen führen.
- Die meisten Benutzer sind in der Lage, kleine Hindernisse selbst zu überwinden;
- Abstieg über eine kleine Schwelle (Bordsteinkante) - Stellen Sie sich senkrecht zur Schwellenachse vor die Tür, achten Sie darauf, dass die Fußstützen den Boden nicht berühren, und verlassen Sie die Schwelle. Vermeiden Sie es, sich nach vorne zu lehnen;
- Hinunterfahren einer großen Schwelle (hoher Bordstein) - Sie sollten mit dem Rücken senkrecht zur Schwellenachse stehen, sich nach vorne lehnen, den Schwerpunkt nach vorne verlagern und dann vom Hindernis wegfahren, wobei Sie die Geschwindigkeit des Abstiegs durch angemessene Unterstützung der Antriebsräder mit den Händen kontrollieren können;
- bei steilen Hindernissen oder Treppen immer um Hilfe bitten;
- Befahren einer Schwelle - Das Befahren einer Schwelle erfordert vom Benutzer Training und Kraft. Sie müssen Ihren gesamten Körper auf die Hinterräder übertragen und machen einen

Hersteller:

Karma Medical Products Co. Ltd., No. 2363 Sec. 2 Da Shiue Road, Min-Hsiung Shiang, Chia-Yi 621, Taiwan

bevollmächtigter Vertreter:

Karma Medical Products (UK) Ltd., 28 Newfield Road, Hagley, Stourbridge, West Midlands, DY9 0JR, Wielka Brytania

Vertrieb:

ANTAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawislanska 43; tel. 22 518 36 00; fax 22 518 36 30; 22 518 36 31

E-mail: antar@antar.net; WWW: www.antar.net