

# Gebruiksaanweisung

Tritthocker SAFETY+

MOBILITY **Plus+**



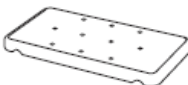
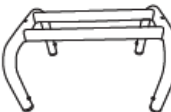
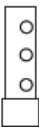
# MOBILITY **Plus+**

## Inhaltsverzeichnis

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>Inhaltsverzeichnis .....</b>                | <b>2</b> |
| <b>Lieferumfang/Teile.....</b>                 | <b>3</b> |
| <b>Allgemeines.....</b>                        | <b>4</b> |
| Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren ..... | 4        |
| Zeichenerklärung.....                          | 4        |
| <b>Sicherheit .....</b>                        | <b>5</b> |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....              | 5        |
| Sicherheitshinweise .....                      | 5        |
| <b>Tritthocker SAFETY+ montieren.....</b>      | <b>7</b> |
| <b>Reinigung und Pflege .....</b>              | <b>8</b> |
| <b>Technische Daten .....</b>                  | <b>9</b> |
| <b>Entsorgung .....</b>                        | <b>9</b> |

# MOBILITY **Plus+**

## Lieferumfang/Teile

|                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
|    |     | 1 x Verpackungs - / Transportkarton<br>1 x Gebrauchsanweisung                       |     |                                                  |
|    | x 1 |    | x 1 | 1 x Trittfläche<br>1 x Untergestell              |
|   | x 4 |   | x 4 | 4x Teleskop-Fußstangen<br>4x Gummifuß            |
|  | x 2 |  | x 2 | 2x Schraube (Kreuzschlitz)<br>2x Unterlegscheibe |

Der Tritthocker wird in einem Karton geliefert. Bewahren Sie den Karton nach Möglichkeit auf, da er zur evtl. späteren Einlagerung dient. Nach Erhalt der Ware überprüfen Sie bitte umgehend die Vollständigkeit und Unversehrtheit des Produktes.

## Allgemeines

### Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu dem Tritthocker SAFETY+ von MOBILITY Plus+. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Benutzung. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Tritthocker verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Tritthocker führen. Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Tritthocker an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

### Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Tritthocker oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

## Sicherheit

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Tritthocker ist ausschließlich für die Benutzung durch eine Person geeignet. Verwenden Sie den Tritthocker nie als Trittleiter. Der Tritthocker muss vor dem Gebrauch korrekt und sicher positioniert werden, ein sicherer Stand auf einer ebenen, horizontalen Fläche muss zu jeder Zeit gewährleistet sein.

Der Tritthocker ist ausschließlich für eine Maximalbelastung von 110 kg konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Der Tritthocker ist kein Kinderspielzeug, kein Medizinprodukt und nicht für therapeutische Zwecke geeignet.

Verwenden Sie den Tritthocker nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

### Sicherheitshinweise



#### Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder mit der Verpackungsfolie oder mit Kleinteilen spielen, können sie sich darin verfangen, die Folie über ihren Kopf stülpen oder die Kleinteile verschlucken und daran ersticken.

- Halten Sie Verpackungsfolie und Kleinteile von Kindern fern.



#### Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Tritthocker kann zu Verletzungen führen.

- Verwenden Sie den Tritthocker ausschließlich auf ebenem, horizontalem und tragfähigem Untergrund, nicht im Freien.
- Stellen Sie sicher, dass der Tritthocker immer auf allen vier Füßen steht.
- Benutzen Sie den Tritthocker nicht für Sportübungen.
- Kinder dürfen den Tritthocker nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Verwenden Sie den Tritthocker niemals, wenn er beschädigt ist.

# MOBILITY Plus+

## HINWEIS!

### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Tritthocker kann zu Beschädigungen am Tritthocker führen.

- Verwenden Sie den Tritthocker nicht mehr, wenn sich Schraubverbindungen gelockert haben oder wenn die Metall- oder Kunststoffteile Verformungen, Risse oder andere Beschädigungen aufweisen.
- Verändern Sie nicht die Konstruktion des Tritthockers.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Elemente am Tritthocker.

## HINWEIS!

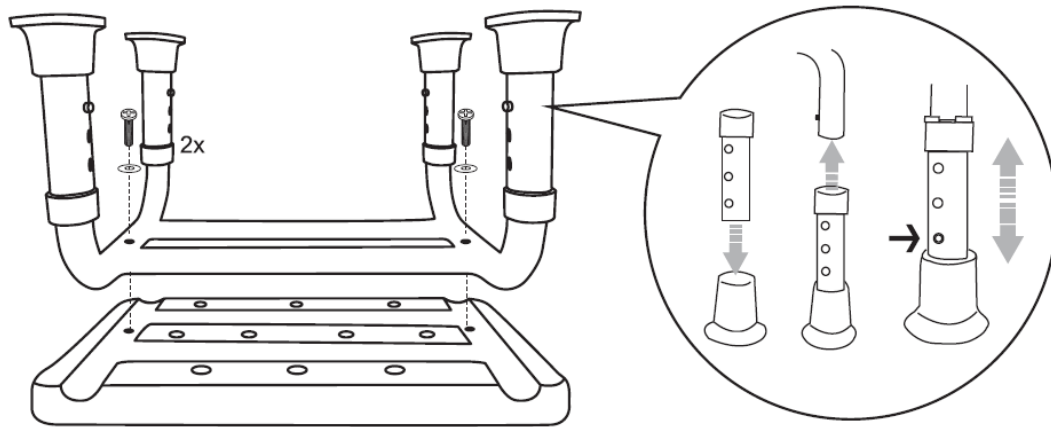
### **Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können Sie den Tritthocker beschädigen.


- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.
  1. Nehmen Sie den Tritthocker aus der Verpackung und entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
  2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (s. Lieferumfang/Teile).
  3. Prüfen Sie, ob der Tritthocker Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Tritthocker nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller.

# MOBILITY **Plus+**

## Tritthocker SAFETY+ montieren



1. Stecken Sie die Gummifüße in die Fußstangen
2. Stecken Sie die Fußstangen in das Untergestell ein.
3. Halten Sie den Druckknopf gedrückt und ziehen die Fußstange auf die gewünschte Länge heraus.
4. Stellen Sie sicher, dass der Druckknopf in eine der Bohrungen in der Fußstange einrastet und alle Fußstangen die gleiche Höhe haben.
5. Platzieren Sie das Untergestell auf der Unterseite der Trittfläche, sodass die Bohrungen übereinander liegen.
6. Verschrauben Sie das Untergestell, mit Hilfe der Schrauben (Kreuzschlitz) und Unterlegscheiben mit den vorgesehenen Bohrungen in der Trittfläche.
7. Richten Sie die Gummifüße so aus, dass der Tritthocker SAFETY+ einen festen und sicheren Stand hat. Sie können den Tritthocker jetzt verwenden.

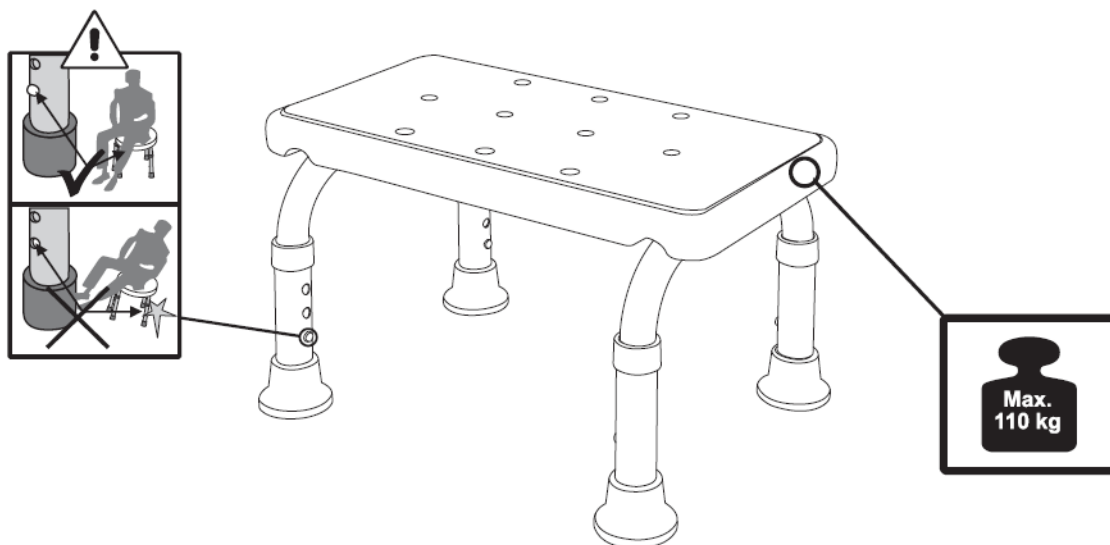

# MOBILITY **Plus+**

## Reinigung und Pflege

### **HINWEIS!**

#### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäße Reinigung des Tritthockers kann zu Beschädigungen an der Oberfläche führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.
  1. Reinigen Sie den Tritthocker mit einem leicht angefeuchteten Tuch und etwas Spülmittel.
  2. Trocknen Sie den Tritthocker nach der Reinigung mit einem weichen trockenen Tuch ab.
  3. Prüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Steckverbindungen auf festen Sitz und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach.

# MOBILITY **Plus+**

## Technische Daten

- Modell: SAFETY+
- Gewicht: ca. 1,76 kg
- Abmessungen H x B x L: max. 27,5 x 29,5 x 41 cm
- Artikelnummer: 1010528
- Maximale Belastung: 110 kg
- Höhenverstellung: 23,5-27,5 cm
- Trittfläche: 29,5 x 41 cm
- Material: Kunststoff (ABS), Aluminium

## Entsorgung



### **Verpackung entsorgen**

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff -Sammlung.

### **Tritthocker entsorgen**

Entsorgen Sie den Tritthocker entsprechend denen in Ihrem Land geltenden Bestimmungen und Gesetzen.

# MOBILITY **Plus+**

# SAFETY+

Rehab Direct GmbH & Co. KG  
Düsseldorfer Str. 6-8  
68219 Mannheim, Deutschland

**Service-Hotline**  
+49 621 – 950 495 55

Stand 15.06.2023

# Instruction manual

Step stool SAFETY+

MOBILITY **Plus+**



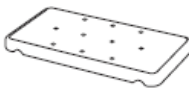
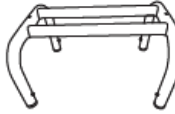
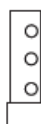
# MOBILITY **Plus+**

## Table of contents

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| <b>Table of contents</b> .....                 | 2 |
| <b>Scope of delivery/parts</b> .....           | 3 |
| <b>General information</b> .....               | 4 |
| Read and keep the instruction manual .....     | 4 |
| Explanation of symbols .....                   | 4 |
| <b>Safety</b> .....                            | 5 |
| Intended Use .....                             | 5 |
| Safety information.....                        | 5 |
| <b>Assembling the SAFETY+ step stool</b> ..... | 7 |
| <b>Technical data</b> .....                    | 9 |
| <b>Disposal</b> .....                          | 9 |

# MOBILITY **Plus+**

## Scope of delivery/parts

|                                                                                     |     |                                                                                     |     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|    |     | 1 x Packaging / transport box                                                       |     |                           |
|    |     | 1 x Instruction manual                                                              |     |                           |
|    | x 1 |    | x 1 | 1 x Footboard             |
|                                                                                     |     | 1 x Underframe                                                                      |     |                           |
|   | x 4 |   | x 4 | 4x Telescopic foot rods   |
|                                                                                     |     | 4x Rubber foot                                                                      |     |                           |
|  | x 2 |  | x 2 | 2x Screw (cross recessed) |
|                                                                                     |     | 2x Flat washer                                                                      |     |                           |

The step stool is delivered in a cardboard box. If possible, keep the cardboard box, as it may be used for storage at a later date. After receiving the product, please check immediately that it is complete and undamaged.

# MOBILITY Plus+

## General information

Read and keep the instruction manual



This instruction manual belongs to the SAFETY+ step stool by MOBILITY Plus+. It contains important information about assembly and use. Read the instructions carefully, especially the safety instructions, before using the step stool.

Failure to follow these instructions may result in serious injury or damage to the step stool. The instructions for use are based on the legal norms and requirements valid in the European Union. When abroad, also pay attention to the country-specific guidelines and laws. Keep the instruction manual for further use. If you pass the step stool on to a third party, be sure to include this instruction manual.

## Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this instruction manual, on the bathtub step-in aid or on its packaging.



This symbol/signal word indicates a danger of moderate risk level which may result in death or serious injuries when ignored.



This symbol/signal word indicates a danger of low risk level which may result in a minor or moderate injury when ignored.



This signal word warns of possible material damage.

# MOBILITY Plus+

## Safety

### Intended Use

The step stool is only suitable for use by one person. Never use the step stool as a stepladder. The step stool must be positioned correctly and safely before use, a safe stand on a flat, horizontal surface must be ensured at all times.

The step stool is designed exclusively for a maximum load of 110 kg. It is intended for private use only and is not suitable for commercial use. The step stool is not a children's toy, not a medical device and not suitable for therapeutic purposes.

Only use the step stool as described in this instruction manual. Any other use is considered as non-intended use and can lead to material damage or even personal injuries. The manufacturer or retailer accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use.

### Safety information



#### Risk of suffocation!

Children may entangle themselves, impose the film over their heads or swallow small parts when playing with the packaging film or small parts.

- Keep packaging and small parts away from children.



#### Risk of injury!

Improper handling of the step stool may lead to injuries.

- Use the step stool only on leveled, horizontal and load-bearing ground, not outdoors.
- Make sure that the step stool is always standing on all four feet.
- Do not use the step stool for sports exercises.
- Children may only use the step stool under adult supervision.
- Never use the step stool if it is damaged.

# MOBILITY Plus+

## **NOTICE!**

### **Risk of damage!**

Improper handling of the step stool can cause damage to the step stool.

- Do not use the step stool if screw connections have loosened or if the metal or plastic parts are deformed, cracked or otherwise damaged.
- Do not change the construction of the step stool.
- Do not attach any additional elements to the step stool.

## **NOTICE!**

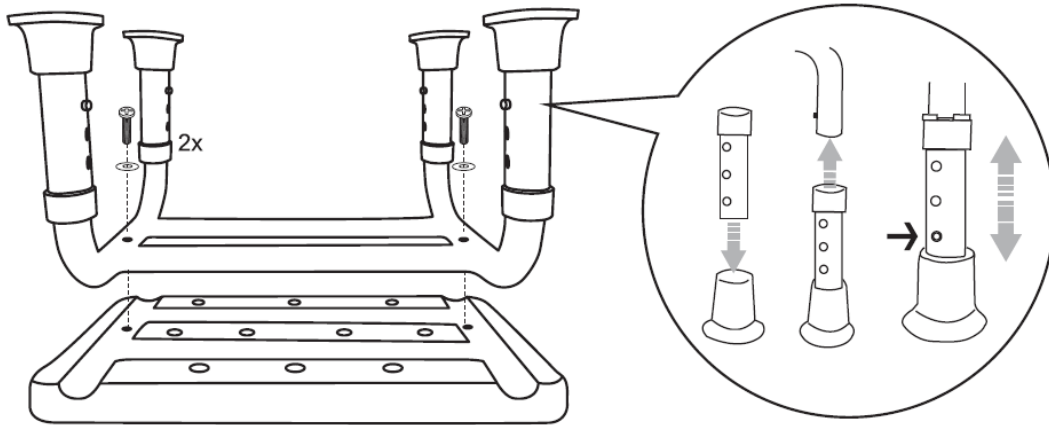
### **Risk of damage!**

If the packaging is opened incautiously with a sharp knife or other sharp objects, you may damage the step stool.


- Caution when opening the package!
  1. Take the step stool out of the packaging and remove the packaging material.
  2. Check whether the delivery is complete (see scope of delivery/parts).
  3. Check whether there is any damage to the step stool. If this is the case, do not use the step stool. Contact the manufacturer.

# MOBILITY **Plus+**

## Assembling the SAFETY+ step stool



1. Insert the rubber feet into the foot rods.
2. Insert the foot rods into the base frame.
3. Press and hold the push button and pull out the foot bar to the desired length.
4. Make sure that the push button engages in one of the holes in the foot rod and that all foot rods are the same height.
5. Place the underframe on the underside of the footboard so that the holes are aligned.
6. Screw the base to the holes provided in the step surface using the screws (cross recess) and washers.
7. Align the rubber feet so that the SAFETY+ step stool has a firm and secure footing. You can now use the step stool.

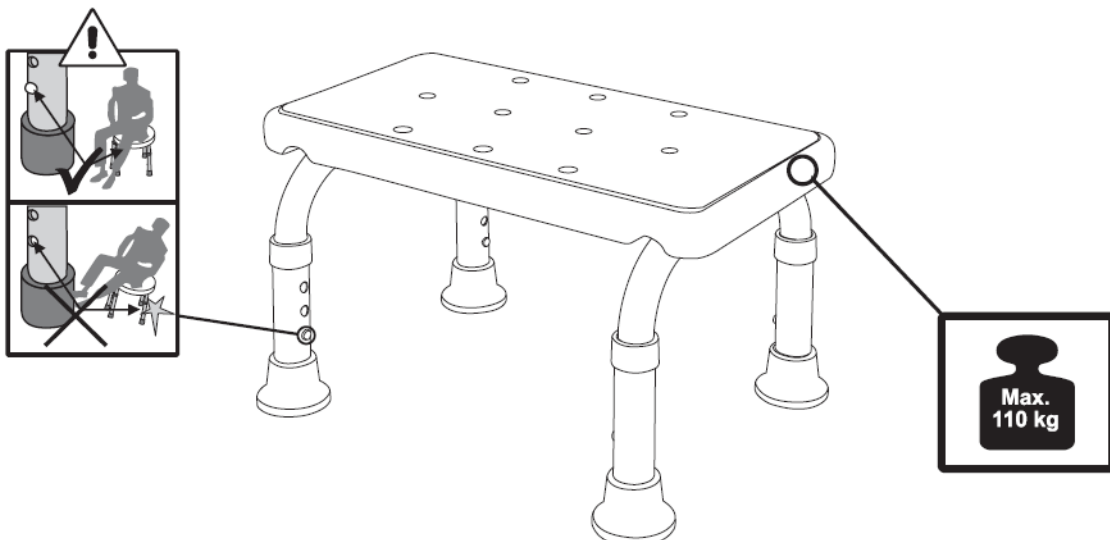

# MOBILITY Plus+

## Cleaning and maintenance

### **NOTICE!**

#### **Risk of damage!**

Improper cleaning of the step stool may lead to damage of the surface.

- Do not use aggressive detergents, brushes with metal or nylon bristles as well as sharp or metallic cleaning items such as knives, spatulas and the like.
  1. Clean the step stool with a slightly damp cloth and some dishwashing liquid.
  2. After cleaning, dry the step stool with a soft dry cloth.
  3. Check all screws and plug connections regularly for tightness and retighten them if necessary.

# MOBILITY **Plus+**

## Technical data

- Model: SAFETY+
- Weight: approx. 1,76 kg
- Measurements H x W x L: max. 27,5 x 29,5 x 41 cm
- Item number: 1010528
- Maximum load: 110 kg
- Height adjustment: 23,5-27,5 cm
- tread surface: 29,5 x 41 cm
- Material: Plastic (ABS), aluminium

## Disposal



### **Disposal of packaging**

Dispose the packaging correctly sorted. Add cardboard and carton to waste-paper and films to the collection of recyclables.

### **Disposal of step stool**

Dispose of the step stool according to the regulations and laws applicable in your country.

# MOBILITY **Plus+**

# SAFETY+

Rehab Direct GmbH & Co. KG  
Düsseldorfer Str. 6-8  
68219 Mannheim, Deutschland

**Service-Hotline**  
+49 621 – 950 495 55

As at 15.06.2023

# Notice d'utilisation

Tabouret Marche-Pied SAFETY+

MOBILITY **Plus+**



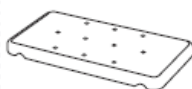
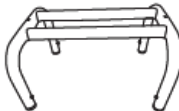
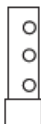
# MOBILITY **Plus+**

## Table des matières

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| <b>Table des matières</b> .....                     | 2 |
| <b>Contenu de la livraison / pièces</b> .....       | 3 |
| <b>Général</b> .....                                | 4 |
| Lire et conserver la notice d'utilisation .....     | 4 |
| Explication des symboles .....                      | 4 |
| <b>Sécurité</b> .....                               | 5 |
| Utilisation conforme à l'usage prévu .....          | 5 |
| Consignes de sécurité .....                         | 5 |
| <b>Montage du tabouret marchepied SAFETY+</b> ..... | 7 |
| <b>Nettoyage et entretien</b> .....                 | 8 |
| <b>Détails techniques</b> .....                     | 9 |
| <b>Traitement des déchets</b> .....                 | 9 |

# MOBILITY **Plus+**

## Contenu de la livraison / pièces

|                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
|    |     | 1 x carton d'emballage / de transport<br>1 x notice d'utilisation                   |     |                                                           |
|    | x 1 |    | x 1 | 1 x surface de marche<br>1 x piètement                    |
|   | x 4 |   | x 4 | 4x barres de pied télescopiques<br>4x pieds en caoutchouc |
|  | x 2 |  | x 2 | 2x vis (cruciformes)<br>2x rondelles                      |

Le marchepied est livré dans un carton. Dans la mesure du possible, conservez le carton qui servira ultérieurement éventuellement à ranger le produit. Après réception, veuillez immédiatement vérifier que la livraison est complète et intacte.

## Général

### Lire et conserver la notice d'utilisation



Cette notice d'utilisation est partie intégrante du tabouret marchepied SAFETY+ de MOBILITY Plus+. Elle contient des informations importantes concernant son montage et son utilisation. Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les mesures de sécurité, avant d'utiliser le produit. Le non-respect de la notice peut entraîner des blessures graves ou abîmer le produit. La notice d'utilisation s'appuie sur les normes en vigueur dans l'Union Européenne. À l'étranger, merci de tenir compte des directives et lois spécifiques au pays. Conservez cette notice afin de pouvoir la consulter ultérieurement. Si le produit est destiné à un tiers, veillez à lui faire parvenir ce mode d'emploi.

### Explication des symboles

Les symboles et expressions suivants sont utilisés dans le mode d'emploi, sur le marchepied ou sur l'emballage.



Cette signalétique indique un danger de niveau moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



Cette signalétique indique un danger de degré moindre qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner une blessure mineure ou modérée.



Cette signalétique met en garde contre de possibles dommages matériels.

# MOBILITY Plus+

## Sécurité

### Utilisation conforme à l'usage prévu

Le tabouret marchepied est exclusivement conçu pour être utilisé par une seule personne. Ne l'utilisez jamais comme un escabeau. Le tabouret marchepied doit être installé correctement et en toute sécurité avant d'être utilisé. Une position stable sur une surface plane et horizontale doit être garantie à chaque instant.

Le tabouret marchepied est exclusivement conçu pour supporter une charge maximale de 110 kg. Il est exclusivement destiné à un usage privé et ne convient pas à une utilisation professionnelle. Ce produit n'est ni un jouet, ni un produit médical et il ne convient pas à des fins thérapeutiques.

N'utilisez le tabouret marchepied que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels voire des blessures corporelles. Le fabricant ou le revendeur n'assument aucune responsabilité concernant les dommages résultants d'une utilisation non conforme ou incorrecte du produit.

### Consignes de sécurité



#### Risque d'étouffement !

Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Ils risqueraient de s'empierger, de mettre le film sur la tête ou d'avaler les petites pièces et de s'étouffer.

- Tenez le film d'emballage et les petites pièces hors de la portée des enfants.



#### Risque de blessure !

Une utilisation non conforme du tabouret marchepied peut conduire à de graves blessures.

- Utiliser le tabouret marchepied uniquement sur une surface plane, horizontale et solide. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- S'assurer que le tabouret marchepied repose toujours sur ses quatre pieds.
- Ne pas utiliser le tabouret marchepied pour la pratique d'exercices sportifs.
- Les enfants ne doivent utiliser le tabouret marchepied que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne jamais utiliser le tabouret marchepied s'il est endommagé.

# MOBILITY Plus+

## REMARQUE

### Risque de dommages !

Une mauvaise utilisation du produit peut entraîner des dommages sur le tabouret marchepied.

- Ne plus utiliser si les raccords à vis sont desserrés ou si les pièces en métal ou en plastique sont déformées, fissurées ou autrement abîmées.
- Ne pas apporter de modifications au tabouret marchepied.
- Ne pas fixer d'élément supplémentaire au tabouret marchepied.

## REMARQUE

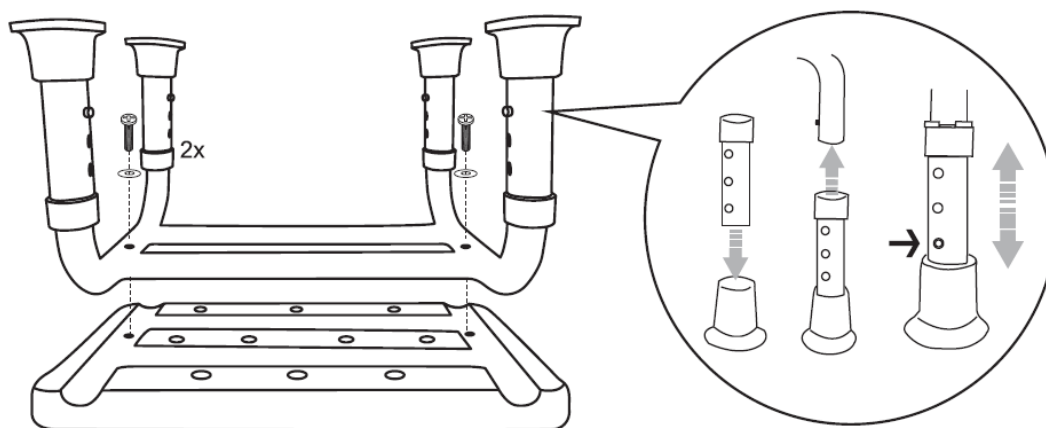
### Risque de dommages !

L'ouverture sans précaution de l'emballage avec un couteau ou tout autre objet pointu peut conduire à l'endommagement du tabouret marchepied.


- Procéder toujours soigneusement au déballage du produit.
  1. Procéder au retrait du tabouret marchepied de son emballage et retirer le matériel de conditionnement.
  2. S'assurer que la livraison est complète (voir contenu de la livraison / pièces).
  3. Prendre connaissance des possibles dommages du tabouret marchepied. Si tel est le cas, ne pas utiliser l'article. Prendre contact avec le fabricant.

# MOBILITY **Plus+**

## Montage du tabouret marchepied SAFETY+



1. Insérer les pieds en caoutchouc sur les barres de pied.
2. Insérer les barres de pied dans le cadre.
3. Maintenir le bouton-poussoir enfoncé et régler la barre de pied à la hauteur souhaitée.
4. S'assurer que le bouton-poussoir s'enclenche dans l'un des orifices de la barre de pied et que les barres de pieds sont toutes à la même hauteur.
5. Placer le piètement sur la surface du tabouret marchepied de façon que les orifices soient superposés.
6. Visser le piètement à l'aide des vis (cruciformes) et des rondelles placées dans les trous prévus à cet effet.
7. Ajuster les pieds en caoutchouc de manière à ce que le tabouret marchepied SAFETY+ soit stable et sécurisé. Il est maintenant possible d'utiliser le tabouret marchepied.

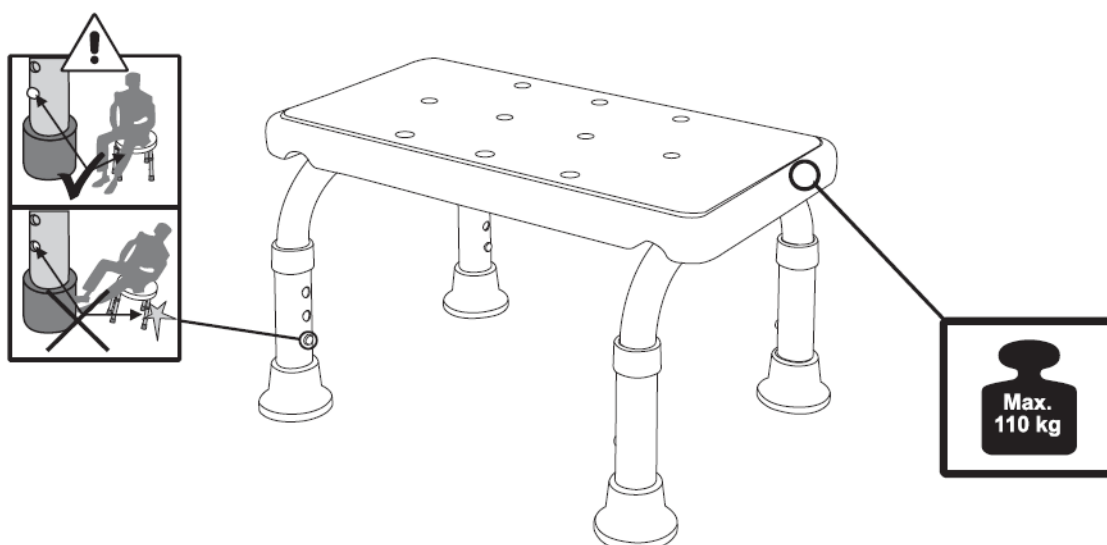

# MOBILITY **Plus+**

## Nettoyage et entretien

### REMARQUE

#### **Risque de dommage !**

Un nettoyage inapproprié du tabouret marchepied peut entraîner des dommages sur sa surface.

- – Ne pas utiliser de produit ménager agressif, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ni d'accessoires de nettoyage tranchants ou en métal tels que des couteaux, spatules et autres.
- 4. Nettoyer le tabouret marchepied à l'aide d'un chiffon légèrement humide et quelques gouttes de liquide vaisselle.
- 5. Après le nettoyage, sécher le tabouret marchepied avec un chiffon doux et sec.
- 6. Vérifier régulièrement le serrage de chaque vis et connecteur et resserrez-les si nécessaire.

# MOBILITY **Plus+**

## Détails techniques

- Modèle : SAFETY+
- Poids : environ 1,76 kg
- Dimensions H x l x L : max. 27,5 x 29,5 x 41 cm
- Numéro d'article : 1010528
- Charge maximale : 110 kg
- Réglage en hauteur : 23,5-27,5 cm
- Surface de la marche : 29,5 x 41 cm
- Matériaux : plastique (ABS), aluminium

## Traitement des déchets

### Éliminer l'emballage

Éliminez les emballages en respectant les consignes de tri.

Déposez papiers, cartons et films plastiques dans le bac jaune.



### Éliminer le tabouret marchepied

Éliminez le tabouret marchepied conformément aux dispositions et lois en vigueur dans votre pays.

MOBILITY **Plus+**

**SAFETY+**

Rehab Direct GmbH & Co. KG  
Düsseldorfer Str. 6-8  
68219 Mannheim, Deutschland

**Service client**  
+49 621 – 950 495 55

Mise à jour du 15.06.2023



MOBILITY **Plus+**