

Garantieschein

Modell:

LOT Nummer: .

Kaufdatum:

Stempel der Verkaufsstelle
und leserliche Unterschrift des Verkäufers:


1. AN TAR SpJ., 03-068 Warszawa, ul.Zawiślańska 43, gewährt hiermit auf das Produkt eine 12monatige Garantie ab dem Tag der Übergabe des Produkts an den Käufer.
2. Während der Garantiefrist verpflichtet sich AN TAR, die notwendigen Reparaturen auszuführen, um das Produkt wieder funktionstüchtig zu machen, innerhalb von 14 Tagen ab Eingang des reklamierten Produkts.
3. AN TAR behält sich das Recht vor, das Produkt auszutauschen, falls angenommen werden muss, dass eine Reparatur unrentabel wäre.
4. Falls Sie feststellen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie es unverzüglich an die Adresse der Firma AN TAR (in Pkt. 1 angegeben) einsenden bzw. Ihre Verkaufsstelle kontaktieren.
5. Vor Ingebrauchnahme sollten Sie die Bedienungsanleitung lesen und sie genauestens einhalten. Zweckentfremdete Benutzung des Produkts hat den Verlust der Garantie zur Folge.
6. Der Garantie unterliegen keine Beschädigungen infolge von Durchbohren bzw. Durchschneiden mit einem scharfen Gegenstand, Beschädigung infolge mechanischer Kräfte von außen, infolge einer das in der Bedienungsanleitung angegebene maximale Körpergewicht des Benutzers überschreitenden Belastung, Kontakt mit fettigen bzw. öligen Substanzen, Benzin.
7. DIESES GARANTIEDOKUMENT IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT EINEMKAUFNACHWEIS (KASSEN BON ODER RECHNUNG), BITTE FÜGEN SIE BEI REKLAMATION DEN KAUFNACHWEIS BEI.
8. Reklamationen ohne Kaufnachweis können nicht berücksichtigt werden.



AN TAR Sp. J.
ul. Zawiślańska 43
03-068 Warszawa
tel. 22 518 36 00
Fax. 22 518 36 30
www.antar.net



SPU – 370, SNW – 500 GEBRAUCHSANWEISUNG

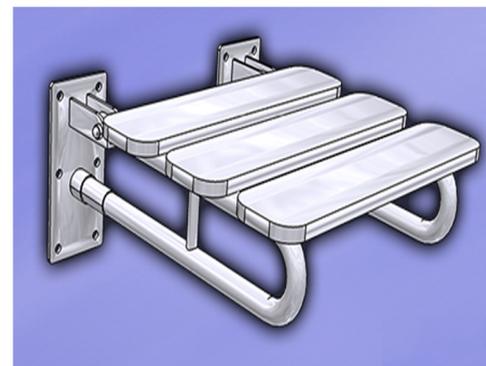

Badsitze helfen Personen mit eingeschränkter Mobilität, die tägliche Körperpflege aufrechtzuerhalten, und tragen zu einer deutlichen Erhöhung der Sicherheit beim Bewegen in der Dusche oder Badewanne bei.

MONTAGE

I. BADEZIMMERSITZ SPU-370 – BEFESTIGUNG AN DIE WAND

1. Es wird empfohlen, den Sitz in horizontaler Position zu montieren.
2. Bohren Sie die Löcher für die Schrauben mit dem Durchmesser, der dem Durchmesser der Schrauben entspricht, so dass der Abstand der Löcher in der Wand, dem Abstand der Löcher in dem Duschsitz entspricht. Die Lochtiefe in der Wand sollte der Einstecktiefe der Schrauben, zuzüglich 10 mm entsprechen.
3. Reinigen Sie die Löcher vom Staub.
4. Stecken Sie die Schrauben in die vorgebohrten Löcher.
5. Legen Sie Kunststoffscheiben dazwischen.
6. Schrauben Sie die Stahlschrauben über die gesamte Länge in die Wand. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben. Die Wand sollte aus Vollkeramik- und Silikatstein oder normalem Beton sein. Stellen Sie sicher, dass das Loch nicht aus der Fuge herausfällt. Der Duschsitz sollte nicht in Trockenbauwänden montiert werden.
7. Montieren Sie die Verschlussstopfen an den Köpfen der Stahlschrauben.
8. Nach der Außerbetriebnahme kann das Produkt als Siedlungsabfall behandelt werden.

II. SNW-500 - MONTAGE AN DER BADEWANNE

1. Es wird empfohlen, den Sitz in horizontaler Position an der Badewanne anzubringen, damit die Armlehnen des Sitzes an den Rändern der Badewanne aufliegen.
2. Nach der Außerbetriebnahme kann das Produkt als Siedlungsabfall behandelt werden.

Wartungshinweise

Überprüfen Sie bei der Benutzung des Duschsitzes regelmäßig, ob die Befestigungsstifte sich nicht lösen. Wenn ein Spiel festgestellt wird, überprüfen Sie die Ursache und ziehen Sie die Schrauben fest oder ersetzen Sie sie durch neue.

Desinfektion

Der Badezimmersitz ist ein wiederverwendbares Produkt. Um die Hygiene nach jedem Gebrauch aufrechtzuerhalten, sprühen Sie das Produkt mit Aerosol, einem Produkt aus Natriumhypochlorit, ein und lassen Sie es 15 Minuten einwirken. Dann gründlich unter fließendem Wasser abspülen.

WARNHINWEISE

1. Vergewissern Sie sich nach der Montage des Duschsitzes, ob dieser fest an der Wand befestigt ist und keine Sturzgefahr besteht. Eine zu schwache Montage des Sitzes kann zu Stürzen und Verletzungen des Benutzers führen.
2. Es ist verboten, den Duschsitz an schwache Wände, z. B. Trockenbauwände, zu montieren, da die Wand während des Gebrauchs einstürzen und der Benutzer ernsthafte Verletzungen erleiden kann.

DIE BEGRENZTE STATISCHE LAST IST 100 KG

Hersteller:

ANTAR Sp. J., ul. Zawiślańska 43, 03-068 Warszawa,
tel. 22 518 36 00, fax: 22 518 36 30

ACHTUNG:

Wenn ein produktbezogener „schwerer Vorfall“ auftritt, der direkt oder indirekt zu einem der folgenden Ereignisse führte, könnte oder hätte führen können:

- a) Tod eines Patienten, Benutzers oder einer anderen Person oder
- (b) vorübergehende oder dauerhafte Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Benutzers oder einer anderen Person oder
- c) eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit

dieser „schwere Vorfall“ muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Anwender oder Patient seinen Wohnsitz hat. Im Falle Polens ist die zuständige Behörde das Amt für die Registrierung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Biozidprodukten.